


Akja 2200 Plus

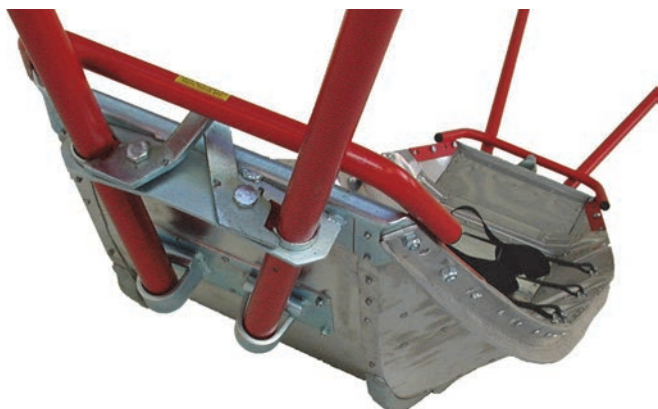

Für Schigelände in allen Schwierigkeitsgraden, präpariert oder unpräpariert.

Besonders gut in **extrem steilen und/oder vereisten** Hängen und Buckelgelände.

Der **klassische Akja** in durchgehender Ausführung für **Zwei-Mann Betrieb**. Design in mehreren tausend Stück weltweit bewährt.

+ 20 cm Länge - mehr Platz auch für großgewachsene Verletzte

+ 20 cm Deichselhöhe für mehr Bedienungskomfort

Jahrelange Haltbarkeit: Der Schlittenkörper ist komplett aus hochfester Aluminiumlegierung gefertigt.

Stabile Fahreigenschaften: Stahlkufen mit Harscheisen an der Unterseite des Akjas und zusätzliche seitliche Kufen für Sicherheit auf allen Schneearten.

Vier abnehmbare Deichseln mit großen Rundgriffen für sicheren und komfortablen Halt.

Neu: Besonders biegefest durch integriertes Aussteifungsprofil.

Deichselhalterung mit Bajonett-Schnellverschlüssen, verschleißfrei und robust. Einfach und sicher zu bedienen, 100 % vereisungssicher.

Tragbügel an beiden Enden für komfortables Heben und Tragen des Akjas mit dem Verletzten.

Vier Fixiergurte mit Alu - Klemmschnallen für sicheren Halt des Verletzten. Mit Handschuhen bedienbar, stufenlos verstellbar, bruch- und vereisungssicher.

Art. Nr.	93031
Abmessung	Länge: 2.200 mm Breite: 560 mm Deichsellänge: 1.650 mm
Gewicht	27,0 kg (inkl. Deichseln)
Anmerkung	Auf Wunsch auch in Sonderlänge 2.000mm erhältlich (Art. Nr. 93059)