


Akja 2200 Plus

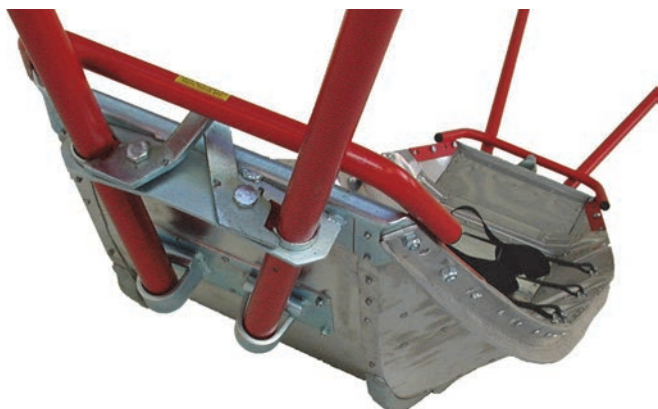

Für Schigelände in allen Schwierigkeitsgraden, präpariert oder unpräpariert.

Besonders gut in **extrem steilen und/oder vereisten** Hängen und Buckelgelände.

Der **klassische Akja** in durchgehender Ausführung für **Zwei-Mann Betrieb**. Design in mehreren tausend Stück weltweit bewährt.

+ 20 cm Länge - mehr Platz auch für großgewachsene Verletzte

+ 20 cm Deichselhöhe für mehr Bedienungskomfort

Jahrelange Haltbarkeit: Der Schlittenkörper ist komplett aus hochfester Aluminiumlegierung gefertigt.

Stabile Fahreigenschaften: Stahlkufen mit Harscheisen an der Unterseite des Akjas und zusätzliche seitliche Kufen für Sicherheit auf allen Schneearten.

Vier abnehmbare Deichseln mit großen Rundgriffen für sicheren und komfortablen Halt. Besonders biegefest durch integriertes Aussteifungsprofil.

Deichselhalterung mit Bajonett-Schnellverschlüssen, verschleißfrei und robust. Einfach und sicher zu bedienen, 100 % vereisungssicher.

Tragbügel an beiden Enden für komfortables Heben und Tragen des Akjas mit dem Verletzten.

Vier Fixiergurte mit Alu - Klemmschnallen für sicheren Halt des Verletzten. Mit Handschuhen bedienbar, stufenlos verstellbar, bruch- und vereisungssicher.

Art. Nr.	93031
Abmessung	Länge: 2.200 mm Breite: 560 mm Deichsellänge: 1.650 mm
Gewicht	27,0 kg (inkl. Deichseln)
Anmerkungen	Auf Wunsch auch in Sonderlänge 2.000mm erhältlich (Art. Nr. 93059)