


Akja 2000

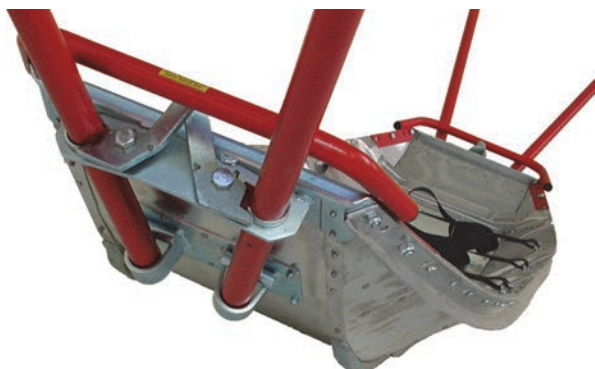

Der **klassische Akja** in durchgehender Ausführung für **Zwei-Mann Betrieb** in **verkürzter Länge**. Design in mehreren tausend Stück weltweit bewährt.

Für Schigelände in allen Schwierigkeitsgraden, präpariert oder unpräpariert. Durch verkürzte Länge von 200cm sehr handlich.

Besonders gut in **extrem steilen und/oder vereisten** Hängen und Buckelgelände.

Jahrelange Haltbarkeit: Der Schlittenkörper ist komplett aus hochfester Aluminiumlegierung gefertigt. Sämtliche Stahlteile sind entweder galvanisiert oder pulverbeschichtet.

Stabile Fahreigenschaften: Stahlkufen mit Harscheisen an der Unterseite des Akjas und zusätzliche seitliche Kufen für Sicherheit auf allen Schneearten.

Vier abnehmbare Deichseln mit großen Rundgriffen für sicheren und komfortablen Halt. Besonders biegefest durch integriertes Aussteifungsprofil.

Deichselhalterung mit Bajonett-Schnellverschlüssen, verschleißfrei und robust. Einfach und sicher zu bedienen, 100 % vereisungssicher.

Tragbügel an beiden Enden für komfortables Heben und Tragen des Akjas mit dem Verletzten.

Vier Fixiergurte mit Alu - Klemmschnallen für sicheren Halt des Verletzten. Mit Handschuhen bedienbar, stufenlos verstellbar, bruch- und vereisungssicher.

Art. Nr.	93059
Abmessung	Länge: 2.000 mm
	Breite: 560 mm
	Deichsellänge: 1.650 mm
Gewicht	26,0 kg (inkl. Deichseln)
Anmerkungen	Verkürzte Version