


Canadier mit Bremskette

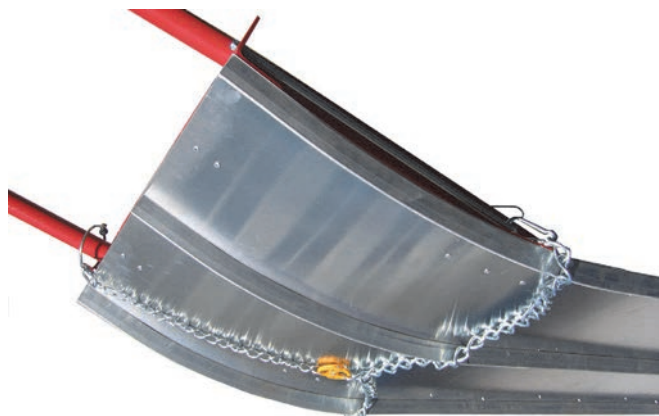

Besonders leichter und handlicher Rettungsschlitten für den Ein-Mann Betrieb. Wird hauptsächlich in der Falllinie gefahren. Durch das Ketten - Bremsystem auch auf steilen und/oder vereisten Pisten problemlos beherrschbar.

Für Schigelände in allen Schwierigkeitsgraden, präpariert oder unpräpariert.

Optimale Richtungsstabilität durch drei stabile Führungskufen aus durchgehenden, speziell für den Canadier entwickelten Alu-Dreikantprofilen.

Ideale Verletztenlagerung durch die ebene Form des Canadiers speziell in Verbindung mit einer Vakuum-Matratze.

Qualität für lange Lebensdauer: Der Canadier ist komplett aus Anticorodal-Aluminium Legierung gefertigt. Die Aluminium-Führungsprofile dienen gleichzeitig als Zusatzrahmen. Dadurch wird der Canadier sehr struktur- und verwindungssteif. Deichseln, Traggriffe, Schutzprofile und Deichselhalterung sind pulverbeschichtet.

Abnehmbare Deichseln, mit Schnellverschlüssen in Fahr- oder Transportposition fixierbar.

Vier Traggriffe an den Enden des Schlittens erleichtern die Handhabung.

Vier Fixiergurte mit Alu - Klemmschnallen für sicheren Halt des Verletzten. Mit Handschuhen bedienbar, stufenlos verstellbar, bruch- und vereisungssicher.

Inklusive **Bremskette** - sehr widerstandsfähige, kadmierte Ausführung mit Befestigungskarabinern.

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Art. Nr. | 93004 |
| Abmessung | Länge: 2.000 mm Breite: 600 mm |
| Gewicht | 19,0 kg (inkl. Deichseln) |
| Anmerkungen | Bremskette inkludiert. |