


## Akja Windschutzverdeck



Befestigung am Akja

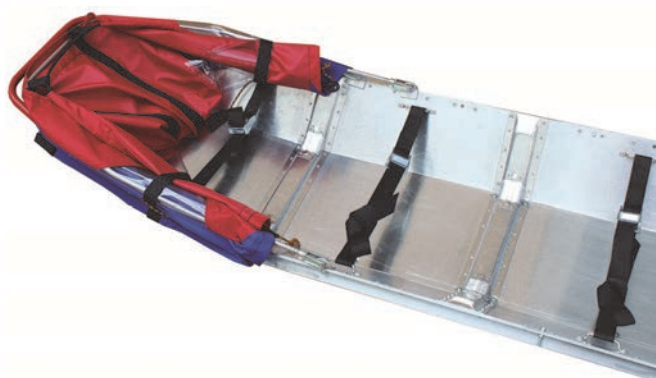

Spannen Verdeck



Teile Windschutzverdeck

**Geräumiges Windschutzverdeck**, bietet dem Verletzten optimalen Schutz gegen Fahrtwind und aufgewirbeltem Schnee - speziell auch, wenn der Akja hinter einem Schneemobil gezogen wird.

Durch die großen Fensterflächen bleibt dem Verletzten ein freies Raumgefühl.

### Einfaches Einladen des Verletzten.

Durch die klappbaren Befestigungsbügel kann das Verdeck zur Gänze eingeklappt werden.

Verdeck kann ständig am Akja montiert bleiben, sodass der Akja bei Bedarf auch mit eingeklapptem Verdeck verwendet werden kann (Verdeck verschwindet unter der Vakuummatratze bzw. dem Verletzensack).

Die **Befestigung am Akja** erfolgt mit mitgelieferten Schnellverschluss-Gabelköpfen und Bändern in den dafür am Akja vorgesehenen Ösen.

**Robust** durch äußerst reißfestes, luft- und wasserundurchlässiges Spezialperlon - Gewebe, das auch bei großer Kälte nicht steif wird.

Das Fenstermaterial aus dem Hochsee - Segelsport hält auch **härtesten Beanspruchung** stand.

Geeignet für den **Betrieb des Akjas** mit Ski oder an der Anhängervorrichtung für Schneemobile.

Geeignet für **alle TYROMONT Akja Modelle**.

Art. Nr.	<b>93063</b>	
Abmessung	Länge:	1.200 mm
	Breite:	580 mm
	Höhe:	700 mm
Gewicht	2,0 kg	
Anmerkung	Ideal in Kombination mit Akja Anhängervorrichtung (Art. 93061).	